
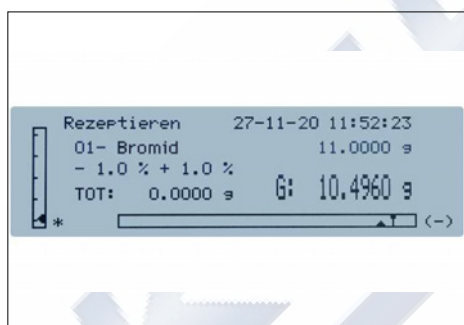




KERN ALJ 200-5DA with optional ioniser , see *accessories*. High-precision semi-micro analytical balance. Thanks to its high level of precision, it is ideal for calibrating pipettes
Note: To prevent evaporation we recommend economical capillary tubes (see standard 8655)

Analytical balances with a large weighing range, graphics display and user-friendly recipe weighing function – also as single-range semi-micro balance with unbelievably high resolution



Convenient recipe-weighing: with the recipe database, up to 99 recipes can be stored, each with up to 20 recipe ingredients with name and target value



Clear printout with date and time. In addition, the components of the mixture are numbered automatically and printed out with the name and weight



GLP/ISO record keeping: professional, detailed GLP Protocol, so that the balance is completely compliant with the relevant standard requirements in accordance with ISO, GLP and GMP

Features

- This new generation of analytical balances combines the highest level of precision with large weighing ranges. Thanks to the new Single-Cell Generation, the weighing result is displayed in a fraction of the time with comparable models. Together with the intuitively structured menu, this means that you can work efficiently and rapidly
- Large glass draught shield with 3 sliding doors for easy access to the items being weighed
- KERN ABP-A: with 3 automatic sliding doors, which can be opened and closed using sensors, and integrated ioniser as standard. Thanks to the Memory Function, the balance stores how far the sliding doors have been opened. This prevents contamination and accelerates processes. Touching the sliding doors “gently” activates the push function and the doors open and shut automatically. The adjustable internal draught shield guarantees maximum stability of the weight readings
- Navigation pad for super quick navigating through the menus
- Automatic internal adjustment in the case of a change in temperature $\geq 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ or timecontrolled every 4 h, guarantees high degree of accuracy and makes the balance independent of its location of use
- The minimum weight of sample can be manually stored in the device or automatically calculated. For weighings below this value, the balance issues a warning message
- Dosage aid: High stability mode and other filter settings can be selected
- Simple recipe weighing and documenting with a combined tare/print function. In addition, the ingredients for the recipe are numbered automatically and printed out with their corresponding number and nominal weight
- Individual user settings can be stored for up to 10 users: user name/number (can be printed out or added to the record for each process),

- password, menu language, user profiles, accessing user settings via barcode, additional guest mode for users who are not logged in, authorizations, eg. B. balance adjustment, changing settings or conditioning or modification of a recipe only by the authorized person & performing the formulation by the user
- RS 232 data interfaces and USB (device) for transferring weighing data and USB (host) to connect a USB keyboard for easy capture of item numbers, recipes, for easier navigation within the menu etc.
 - U.S. FDA 21 Part 11: assists you in data integrity in accordance with U.S. FDA 21 Part 11 (for example weighing result, sample ID, user name, scales ID, ...)
 - Menu languages DE, EN
 - Automatic data output to the PC/printer each time the balance is steady for models with [d] = 0,0001 g
 - Multi-function weighing plate included with delivery, minimises the effect of currents of air in the weighing chamber and therefore significantly improves the stabilisation time and repeatability. In addition samples, sample paper, PCR containers, micro centrifuge tubes and many other items which protrude can be easily fixed in place and weighed easily
 - ABP 200-5M: Erlenmeyer flask holder included with delivery
 - Protective working cover included with delivery

Technical data

- Luminescent OLED display, digit height 12 mm bright with high contrast, for easy reading of the weight, even in poor lighting conditions
- Dimensions weighing surface $\varnothing 91\text{ mm}$, stainless steel
- Weighing space WxDxH 166x156x220 mm
- Overall dimensions WxDxH 220x370x350 mm
- Net weight approx. 8 kg
- Permissible ambient temperature 10 $^{\circ}\text{C}$ /30 $^{\circ}\text{C}$


Accessories

- Protective working cover, scope of delivery 5 items, KERN YBA-A06S05
- Set for density determination of liquids and solids with density $\leq/\geq 1$, the density is indicated directly on the display, KERN YDB-03
- **1** Internal draught shield made of glass, KERN ABP-A02
- **2** Draught shield rear panel with integrated ionizer to neutralise electrostatic charge. Is fitted in place of the existing glass rear panel of the draught shield. Suitable for all models in the range, please order at the time you order your balance, the scope of delivery is the rear panel, ionizer, Universal plug-in power supply. Factory Option, KERN ABP-A01
- USB barcode scanner, hand-held version, dimensions WxDxH 152x84x63 mm, KERN PET-A09
- Minimum weight of sample, smallest weight to be weighed, depending on the required process accuracy, only in combination with a DAkKS calibration certificate, KERN 969-103
- Equipment qualification: compliant qualification concept which includes the following validation services, Installation Qualification (IQ), Operating Qualification (OQ)
- Further details, plenty of further accessories and suitable printers see *Accessories*

Single-cell advanced technology:

- Fully automatic manufactured weighing cell from one piece of material
- Stable temperature behaviour
- Short stabilisation time: steady weight values within approx. 2 s (models with [d] = 0,1 mg), approx. 8 s (models with [d] = 0,01 mg) under laboratory conditions
- Shock proof construction
- High corner load performance

STANDARD

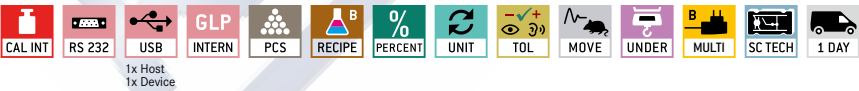

OPTION



FACTORY



Model	Weighing capacity [Max]	Readability [d]	Verification value [e]	Minimal load [Min]	Reproducibility	Linearity	Verification	Options
	g	mg	mg	mg	mg	mg	KERN	DAkKS Calibr. Certificate
ABP 100-5M	135	0,01	1	1	0,05	$\pm 0,1$	965-201	963-101
ABP 200-5M	220	0,01	1	1	0,05	$\pm 0,1$	965-201	963-101
ABP 100-4M	120	0,1	1	10	0,1	$\pm 0,2$	965-201	963-101
ABP 200-4M	220	0,1	1	10	0,1	$\pm 0,2$	965-201	963-101
ABP 300-4M	320	0,1	1	10	0,2	$\pm 0,3$	965-201	963-101

Multi-division balance, with increasing or decreasing load, it switches automatically to the next largest or smallest weighing range [Max] and readout [d].

ABP 100-5DM	52 120	0,01 0,1	1 1	1	0,02 0,1	$\pm 0,05$ 0,2	965-201	963-101
ABP 200-5DM	102 220	0,01 0,1	1 1	1	0,05 0,1	$\pm 0,1$ 0,2	965-201	963-101

Note: For devices that require verification (conformity assessment according to NAWI 2014/31/EU), please include the verification when placing your order. The initial verification is not possible after delivery. Please inform the full address of the location of use for the initial verification.

KERN Piktogram:

 CAL INT	Belső jusztírozó automatika (CAL) A pontosság beállítása egy belső, motorral mozgatott jusztírozó súllyal történik.	 PCS	Darbszámlálás A referencia darabszám választható. A kijelzés átkapcsolása darabszámról súlyra.	 UNDER	Horoggal végzett mérések A mérleg alsó felén is lehetőség van a terhelésre.
 CAL EXT	Jusztírozó program (CAL) A pontossági beállításhoz külső súly szükséges.	 RECIPE A	Receptúra A tára-edény súlya és a recept összetevői számára külön tárolóval (nettó összesen)	 BATT	Elemes működés A mérleg elemmel (is) működik. Az elem típusa a mérleg típusától függ.
 MEMORY	Memória. A mérleg beépített memóriával rendelkezik. Pl. sorszám, tömeg, tárazási tömeg stb. PLU	 RECIPE B	Receptúra Belső memória a recepteknek névvel, cél-értékkel és az összetevőkkel. Felhasználói útmutatás a kijelzőn keresztül.	 ACCU	Akkumulátoros működés Újratölthető készlet.
 ALIBI	ALIBI MEMORY A mérési eredmények elektronikus elérése összhangban a 2009/23/EC szabvánnyal.	 RECIPE C	Receptúra Belső memória a recepteknek névvel, cél-értékkel és az összetevőkkel. Felhasználói útmutatás a kijelzőn keresztül. Kényelmi funkciók, mint pl.: vonalkód és visszaszámolási funkció.	 MULTI	Univerzális adapter:univerzális bemenet, cserélhető szabványos dugvillák az alábbi szabványok szerint: A) EU, GB B) EU, GB, CH, USA C) EU, GB, CH, USA, AUS
 RS 232	RS-232 adat-interfész A mérleg csatlakoztatására nyomtatóhoz, PC-hez vagy hálózathoz.	 SUM	Össztömeg meghatározás A tételek tömegét összeadja és az összesített értéket kinyomtatja.	 230 V	230V/50Hz Szabványos kialakítás, Németország, Magyarország. Rendelhető angol, amerikai vagy ausztrál kialakítás is.
 RS 485	RS-485 adat-interfész A mérleg csatlakoztatására nyomtatóhoz, PC-hez vagy egyéb periférikus eszközhöz. Az elektromágneses zavarokra kevésbé érzékeny.	 KCP	KERN Kommunikációs Protokoll KCP KERN mérlegekhez és más műszerekhez használható szabványos adatátviteli lehetőség A Kern KCP-s eszközök könnyen kapcsolhatóak PC-khez, PLC-khez és más rendszerekhez.	 230 V	Hálózati kábel 230V/50Hz, Németország, Magyarország. Rendelhető angol, amerikai vagy ausztrál kialakítás is.
 USB	USB adat-interfész A mérleg csatlakoztatására nyomtatóhoz, PC-hez vagy egyéb periférikus eszközhöz.	 DMS	Erőmérő cella	 T-FORK	Rezgővillás technológia Rövid beállási idő, gyors mintavételezés.
 BT	Bluetooth adat-interfész Adatok átvitelére nyomtatóra, PC-re vagy egyéb periférikus eszközhöz	 PERCENT	Százalék meghatározás A célértéktől (100%) való eltérés kijelzése %-ban.	 FORCE	Elektromágneses erő kompenzáció
 W LAN	Wifi adat-interfész Adatok átvitelére nyomtatóra, PC-re vagy egyéb periférikus eszközhöz.	 UNIT	Súlymértékegységek Gombnyomással átváltható pl. nem metrikus mértékegységekre. Lásd a mérlegmodell.	 SC TECH	Monoblokk cella Az erőkompenzációs eljárás továbbfejlesztett változata.Nagyobb precizitás.
 SWITCH	Kontrol kimenet Optocsatoló, digitális I/O Csatlakozás relékhez, ellenőrző Impákhoz, szelepekhez stb.	 TOL	Mérés tűréshatárral A felső és az alsó határérték külön programozható. Pl. adagolásnál/válogatásnál és osztályozásnál.	 M +3 DAYS	Hitelesíthető mérleg A várható átfutási időt a piktogram mutatja. Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.
 DUAL	Interfész második mérleghez Közvetlen kapcsolat egy második mérleghez.	 MOVE	Rezgés-mentes mérés (Állatmérő program) A rezgés kiszűrésevel stabil mérés érhető el.	 DAKKS +3 DAYS	DAKKS kalibrálás kérhető A várható átfutási időt a piktogram mutatja. Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.
 LAN	Hálózati interfész A mérleg csatlakoztatására egy Ethernet hálózathoz. A KERN mérlegekhez univerzális RS-232/LAN konverter is használható.	 IP	Por és folyadék elleni védetség, IPxx A piktogram mutatja a védetség mértékét. Pl. IP67	 DAY	A várható szállítási időt a piktogram mutatja. Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.
 KUP	KERN Univerzális Port (KUP): adatátviteli lehetőség KUP interfészekkel (pl. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN, Ananlóg, Ethernet) adatcserével	 EASY-T	Easy Touch Kapcsolódás Kapcsolódás, adatátvitel és kontrol PC-hez, táblagéphez és okos telefonhoz.	 DAYS	Raklap szállítmány A várható szállítási időt a piktogram mutatja. Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.
 GLP INTERN	GLP /ISO jegyzőkönyvezés A mérési adatok megjelenítése dátummal órával nyomtatótól függetlenül.	 INOX	Rozsdamentes acél A mérleg korrózió ellen védett.	 ISO +10 DAYS	Gyári kalibrálás (ISO) A várható átfutási időt a piktogram mutatja. Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.
 GLP PRINTER	GLP /ISO jegyzőkönyvezés A mérési adatok megjelenítése dátummal órával. Csak KERN nyomtatókkal.				
 ANALOG	Analog interfész Megfelelő periférikus eszközökhöz való kapcsolódás analog mérésekhez.				

PRECIMER KFT.



info@precimer.hu



https://precimer.hu



https://facebook.com/Precimer.Kft

PRECIMER

Mérőeszközök, mérlegek, súlyok kereskedelme, kalibrálása, hitelesítése

Számlázási cím: 1163 Budapest, Fuvallat utca 53.

Iroda és labor: 1163 Budapest, Cziráki utca 32.

Telefon: +36-1-273-1006, +36-1-383-7705

Fax: +36-1-383-1985

