



KERN ALJ 200-5DA with optional ioniser ■, see accessories. High-precision semi-micro analytical balance. Thanks to its high level of precision, it is ideal for calibrating pipettes Note: To prevent evaporation we recommend economical capillary tubes (see standard 8655)

Analytical balances with a large weighing range, graphics display and user-friendly recipe weighing function – also as single-range semi-micro balance with unbelievably high resolution



Convenient recipe-weighing: with the recipe database, up to 99 recipes can be stored, each with up to 20 recipe ingredients with name and target value




Clear printout with date and time. In addition, the components of the mixture are numbered automatically and printed out with the name and weight



GLP/ISO record keeping: professional, detailed GLP Protocol, so that the balance is completely compliant with the relevant standard requirements in accordance with ISO, GLP and GMP



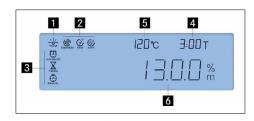







Particularly user-friendly moisture analyser with high-quality halogen quartz glass heater - also available as version with [d] = 10 mg, ideal for recurring rapid tests

Features

- KERN DAB 200-2: Version with lower resolution, whereby the switch-off criterion is reached faster, which saves time. Ideal for quick tests and spot checks
- · Backlit graphic display, digit height 14 mm
- 1 Active drying process
- 2 Active heating profile
- 3 Active switch-off criteria
- 4 Previous drying time
- 5 Current temperature

- 6 Current moisture content in %
- 400 W halogen-quartz glass heater
- Suitable for temperature-insensitive samples
- · Observation window above the sample, useful during initial setting
- · Internal memory for automatic sequence of 15 complete drying processes and 5 drying processes carried out
- · The last value measured remains on the display until it is replaced by a new measurement
- · 50 sample plates included

- Application handbook: In the download centre you will find a practical application handbook containing many examples, field reports, settings and tips for each KERN moisture analyser
- · Note: both models are also available in infrared version, see accessories



























| KERN | DAB 100-3 | DAB 200-2 |
|---|---|----------------|
| Readability [d] Weight/Moisture (%) | 0,001 g / 0,01% | 0,01 g / 0,05% |
| Weighing capacity [Max] | 110 g | 200 g |
| Reproducibility weight of sample 2 g* | 0,15% | 1,5% |
| Reproducibility weight of sample 10 g* | 0,03% | 0,3% |
| Display after drying (Display can be switched | over at any time) | |
| Moisture [%] = Moisture content (M) from wet weight (W) | 0 - 100 % | |
| Dry content [%] = Dry weight (D) from W | 100 - 0 % | |
| Moisture content (M) | Absolute value in [g] | |
| Temperature range (in steps up to) | 40 °C - 199 °C (1 °C) | |
| Drying modes | | |
| | ✓ Gentle drying | |
| | ┌└ Rapid drying | |
| Switch-off criteria | · Automatic switch-off (2 mg loss in weight in 45 s) | |
| | · Time controlled switch-off (3 min - 99 min 59 s, 10 s increments) | |
| | Manual switch-off at the press of a button | |
| Recall of measurement/ Log output | Interval can be set from 1 s - 10 min | |
| | (Only when used with printer or PC) | |
| Overall dimensions W×D×H | 240×365×180 mm | |
| Net weight | 4,82 kg | |
| Price excl. of VAT ex works € | | |
| Option DAkkS Calibr. Certificate Mass | KERN 963-127 | |
| Option Factory Calibr. Certificate Temperature | KERN 964-305 | |

^{*} application-dependent

Accessories

- Sample plates aluminium, Ø 90 mm, unit of 80 pieces, KERN MLB-A01A
- · Round fiberglass filter, medium mechanical stability, without organic binder, box of 100 pieces, KERN RH-A02
- Round fiberglass filter, medium mechanical stability, without organic binder, box of 100 pieces, KERN YMF-A01
- 7 Temperature calibration set consists of measuring sensor and display device, KERN DAB-A01.
- 8 Infrared quartz glass heater, temperature range 40 °C-160 °C, Factory Option, KERN DAB-A02
- · Display of the drying process in conjunction with BalanceConnection, Software BalanceConnection, for flexible recording or transmission of measured values, in particular also to Microsoft® Excel or Access as well as transfer of this data to other Apps and programs, for more details see internet, scope of supplies: 1 CD, 1 license, KERN SCD-4.0
- Thermal printer, KERN YKB-01N
- · Matrix needle printer, to print the weights on normal paper, ideal for long-term archiving, KERN 911-013

KERN Piktogram:



CAL EXT

MEMORY

• AREA •

RS 232

RS 485

PLU


ALIBI MEMORY

RS-232 adat-interfész

RS-485 adat-interfész

A mérleg csatlakoztatására

Belső jusztírozó automatika (CAL) A pontosság beállítása egy belső, motorral mozgatott jusztírozó súllyal történik.

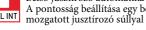

Jusztírozó program (CAL)

A pontossági beállításhoz külső súly szükséges

A mérleg beépített memóriával rendelkezik.

Pl. sorszám, tömeg, tárázási tömeg stb.

A mérési eredmények elektronikus

nyomtatóhoz, PC-hez vagy hálózathoz.



Darbszámlálás

A referencia darabszám választható. A kijelzés átkapcsolása darabszámról súlyra.



A tára-edény súlya és a recept összetevői



számára külön tárolóval (nettó összesen)



Receptúra

Belső memória a recepteknek névvel, célértékkel és az összetevőkkel.

Felhasználói útmutatás a kijelzőn keresztül.



Receptúra

Belső memória a recepteknek névvel, célértékkel és az összetevőkkel. Felhasználói útmutatás a kijelzőn keresztül. Kényelmi funkciók, mint pl.: vonalkód és visszaszámolási funkció.



Össztömeg meghatározás A tételek tömegét összeadja és az összesített értéket kinyomtatja.



A mérleg csatlakoztatására nyomtatóhoz, PC-hez vagy egyéb periférikus eszközhöz. Az elektromágneses zavarokra kevésbé érzékeny.

elérése összhangban a 2009/23/EC szabvánnyal RECIPE



USB adat-interfész A mérleg csatlakoztatására nyomtatóhoz,

PC-hez vagy egyéb periférikus eszközhöz. Bluetooth adat-interfész



Adatok átvitelére nyomtatóra, PC-re vagy egyéb periférikus eszközre

Wifi adat-interfész Adatok átvitelére nyomtatóra, PC-re vagy egyéb periférikus eszközre.



WLAN

Kontrol kimenet Optocsatoló, digitális I/O Csatlakozás relékhez, ellenőrző lmpákhoz, szelepekhez stb.



Interfész második mérleghez Közvetlen kapcsolat egy második mérleghez.



Hálózati interfész

A mérleg csatlakoztatására egy Ethernet hálózathoz. A KERN mérlegekhez univerzális RS-232/LAN konverter is használható. LAN

KERN Univerzális Port (KUP): adatátviteli lehetőség KUP interfészekkel (pl. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN, Ananlóg, Ethernet) adatcserével KUP



GLP /ISO jegyzőkönyvezés A mérési adatok megje**len**ítése **dát**ummal órával nyomtatótól **függetle**nül.



GLP /ISO jegyzőkönyvezés A mérési adatok megjelenítése dátummal órával. Csak KERN nyomtatókkal.



Analóg interfész Megfelelő periférikus eszközökhöz való kapcsolódás analóg mérésekhez.

KERN Kommunikációs Protokol KCP KERN mérlegekhez és más műszerekhez használható szabványos adatátviteli lehetőség A Kern KCP-s eszközök könnyen

kapcsolhatóak PC-khez, PLC-khez és más rendszerekhez.



Százalék meghatározás A célértéktől (100%) való eltérés kijelzése %-ban.



Súlymértékegységek Gombnyomással átváltható pl. nem metrikus mérték**egységekr**e. Lásd a mérlegmodellt.



Mérés tűréshatárral A felső és az alsó határérték külön programozható. Pl. adagolásnál/válogatásnál és osztályozásnál.



Rezgés-mentes mérés (Állatmérő program) A rezgés kiszűrésével stabill mérés érhető el.



Por és folyadék elleni védettség, IPxx A piktogram mutatja a védettség mértékét.



Easy Touch Kapcsolódás Kapcsolódás, adatátvitel és kontrol PC-hez, táblagéphez és okos telefonhoz.



Rozsdamentes acél A mérleg korrózió ellen védett.



Horoggal végzett mérések A mérleg alsó felén is lehetőség van a terhelésre.



Elemes működés A mérleg elemmel (is) működik. Az elem típusa a mérleg típusától függ.



Akkumulátoros működés Újratölthető készlet.



Univerzális adapter:univerzális bemenet, cserélhető szabványos dugvillák az alábbi szabványok szerint:

A) EU, GB

B) EU, GB, CH, USA

C) EU, GB, CH, USA, AUS



230V/50Hz Szabványos kialakítás,

Németország, Magyarország. 230 V Rendelhető angol, amerikai vagy ausztrál kialakítás is.



Hálózati kábel 230V/50Hz, Németország, Magyarország. Rendelhető angol, amerikai vagy ausztrál



DMS

Erőmérő cella



Rezgővillás technológia Rövid beállási idő, gyors mintavételezés.



Elektromágneses erő kompenzáció



Monoblokk cella

Az erőkompenzációs eljárás továbbfejlesztett változata. Nagyobb precizítás.



Hitelesíthető mérleg

A várhat átfutási átfutási időt a piktogram mutatja. Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.



DAkkS kalibrálás kérhető

Gyári kalibrálás (ISO)

A várhatátfutási időt a piktogram mutatja. Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.



A várhat szállítási időt a piktogram mutatja. Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.



Raklap szállítmány



A várhat szállítási időt a piktogram mutatja. Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.



A várható átfutási időt a piktogram mutatja. Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.





PRECIMER KFT.



info@precimer.hu



https://precimer.hu





https://facebook.com/Precimer.Kft



Mérőeszközök, mérlegek, súlyok kereskedelme, kalibrálása. hitelesítése Számlázási cím: 1163 Budapest, Fuvallat utca 53.

Iroda és labor: 1163 Budapest, Cziráki utca 32.

Telefon: +36-1-273-1006, +36-1-383-7705

Fax: +36-1-383-1985